

# *Les appareils auditifs et leur entretien*




# RDV CHEZ L'AUDIOPROTHÉSISTE

- Ordonnance **ORL** pour essais d'appareils (1 mois)
- Ordonnance **médecin généraliste** pour renouvellement d'appareils
- Faire enlever bouchons de cérumen avant pour prise d'empreinte si difficultés de manipulation
- Réglage des appareils en centre d'audioprothèse + entretien (**tous les 6 mois maximum**)

# LES APPAREILS AUDITIFS

Bleu : oreille gauche

Rouge : oreille droite


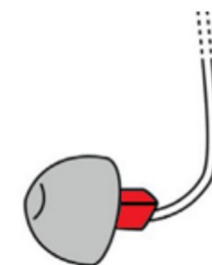


## Comment vérifier s'ils fonctionnent :



Placez l'appareil dans la paume de votre main et fermer le poing

☐ il doit normalement émettre un **sifflement** plus ou moins fort appelé *larsen*

Porter les appareils tous les jours ( >8 heures/jour)

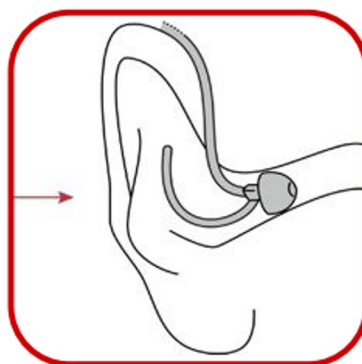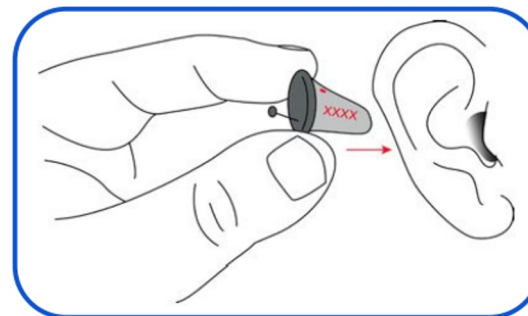


Enlever les appareils pour dormir / pour la douche

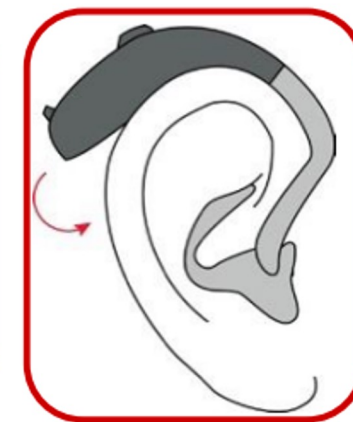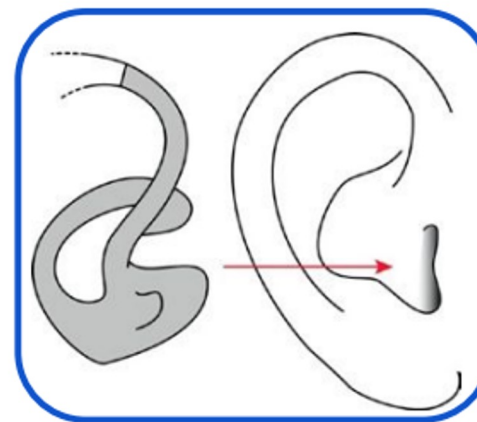


# ➤ APPAREILS À PILES

**Arrêt :**  
Ouvrir d'un cran, ou  
complètement le tiroir  
pile.

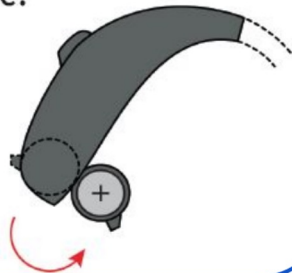

**Marche :**  
Fermer le tiroir pile en  
poussant légèrement  
dessus.

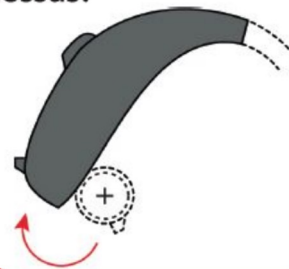

Éteindre tous les soirs

Allumer tous les matins

Bip d'avertissement 30 minutes avant que la pile soit vide



pile 10 :  
3 à 5 jours



pile 312 :  
6 à 10 jours





pile 13 :  
10 à 15 jours



pile 675 :  
14 à 18 jours

**En cas de panne** : Vérifier que la pile n'est pas à l'envers / **changer les piles**

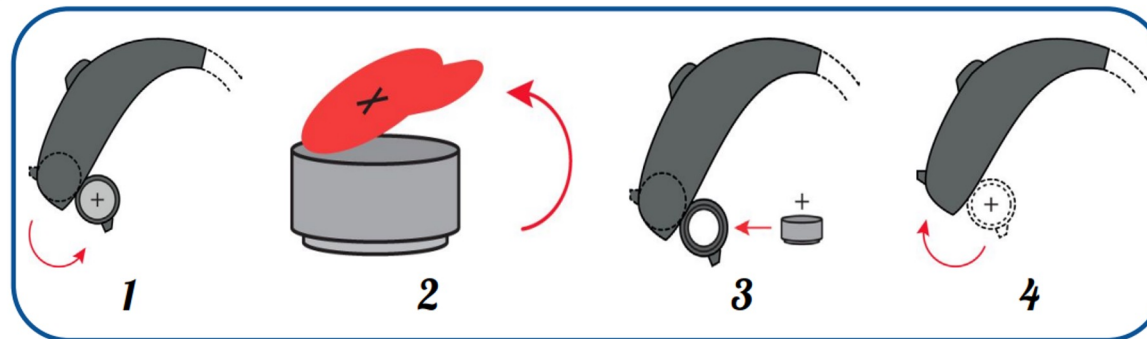

Recyclage des piles 

## ➤ APPAREILS RECHARGEABLES

Charger l'appareil **tous les soirs**

Temps de charge : 3h

Autonomie : 20h

L'appareil s'éteint automatiquement dans le chargeur

Il s'allume automatiquement quand on le sort du chargeur

**En cas de panne** : Appuyer **5 secondes sur le bouton** de l'appareil pour allumer / éteindre l'appareil manuellement



## ➤ ENTRETIEN DES APPAREILS AVEC FIL ÉLECTRIQUE

Nettoyer l'écouteur (sortie du son) avec une brosse / lingette adaptée sans imbiber de produit nettoyant

**En cas de panne : enlever le dôme et changer le filtre**






## ➤ L'INTRA





Ce pare-cérumen se présente sous forme d'un petit bâtonnet :

- Le côté A comporte un nouveau filtre
- Le côté B vide permet d'enlever l'ancien filtre

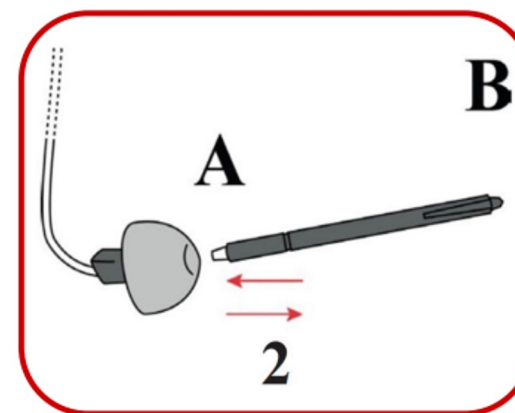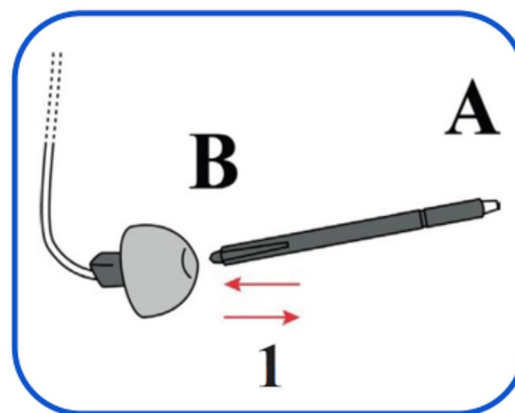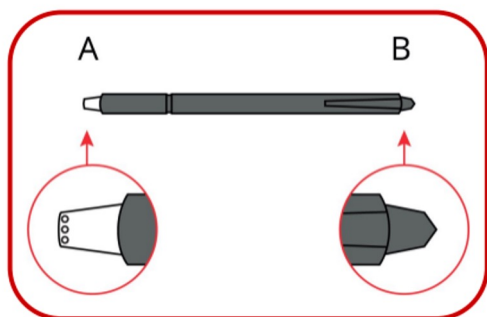

1. Retirer le dôme en silicone (sauf si embout sur mesure en acryl dur)
2. Retirer le filtre usagé à l'aide du **côté B** : il suffit de « piquer » bien droit
3. Placer le nouveau filtre de la même manière avec le **côté A** du bâtonnet


## ➤ ENTRETIEN DES APPAREILS AVEC TUBE

Aller chez l'audioprothésiste pour changer les tubes s'ils sont durs  
(**tous les 3 mois**)

**En cas de panne** : enlever le tube et souffler de l'air dedans pour éliminer l'humidité



# ACCESSOIRES & APPLICATIONS SMARTPHONE

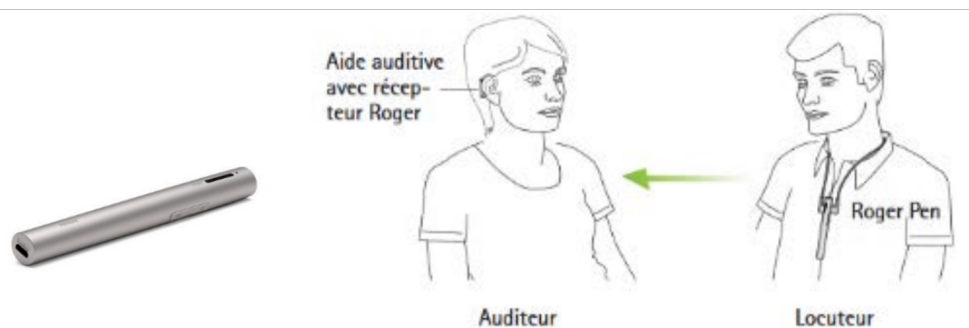

Possibilité de connecter les appareils à votre téléphone pour :

- Ajuster le **volume** ponctuellement
- Vérifier l'état de charge de la **batterie**
- **Localiser** les appareils en cas de perte

